


# バッテリー取付け・交換方法

# AED-3100

**注意** 使用済み／使用期限切れのバッテリーは、すみやかに交換してください。

## 準備するもの

### 1 AED本体

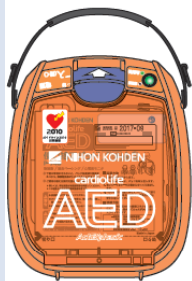


### 2 取付け・交換用バッテリー



バッテリーパック  
SB-310V

### 3 バッテリー使用開始日ラベル

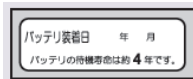

## 1 使用済みのバッテリーを本体から取り外す

ラッチを押してゆっくり取り外します。

※バッテリーパックの取り外しは、必ずフタを閉じて電源を切り、5秒以上経過してからゆっくり行ってください。  
データが正しく保存されなかったり、ステータスインジケータが正しく動作できない場合があります。



## 2 新しいバッテリーを取り付ける

※バッテリーパックのラベルに使用開始日を記入します。

### 注意

バッテリーの取付けは、AED本体のフタを閉じて電源を切った状態で行ってください。

1 図の向きにバッテリーコネクタ部を差し込みます。



2 ラッチがロックするまで押し込みます。




カチッと音がするまで

## 3 ステータスインジケータを確認する

ステータスインジケータが緑色(使用可)であることを確認します。

※バッテリーパックを取り付けると、「ピヨッ」と認識音が鳴り、約15秒後にステータスインジケータが緑色に変わります。

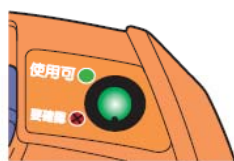

## ■ 使用済みのバッテリーの廃棄について

使用済みのバッテリーは以下の方法で廃棄してください。

＜一般家庭でご使用の場合＞  
各自治体の指示に従って廃棄してください。

＜一般家庭以外でご使用の場合＞  
産業廃棄物として廃棄してください。

\*廃棄する際は、ショート防止のため、バッテリーの端子部分にテープなどを貼付し、絶縁してください。

\*上記廃棄方法が不明な場合は、当社営業員・販売店までお問い合わせください。

## 4 バッテリー使用開始日ラベルを貼り付ける


バッテリーの使用開始日をラベルに記入し、設置管理タグに貼ります。



## 5 各収納ケースに設置する

### 注意

各収納ケースに収納する場合は、電極パッドの使用期限とバッテリーの使用開始日の表示が、キャリングバッグや収納ケースの外からでも必ず見えるように収納してください。

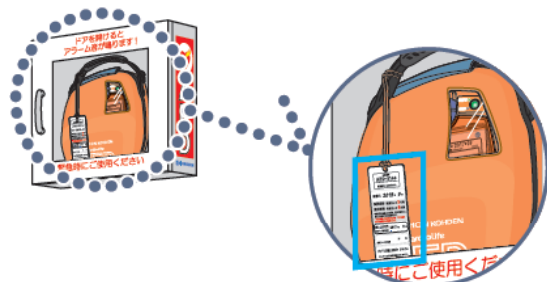

## 6 AEDの日常点検

取扱説明書にある点検表を使用して、AEDの日常点検を実施します。

点検表は、当社ホームページ

<http://www.aed-life.com/nihonkohden/dailycheck.html>

からもダウンロードできます。  
必要に応じてご使用ください。